



Transmis par site n° :

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

☐ **URGENT** - Promis-le

Fiche de Renseignements

PARASITOLOGIE – COPRO CULTURE – VIROLOGIE DES SELLES

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT

NOM et prénom : **Date de naissance :** **Age :**

Traitement médicamenteux : ☐ Non ☐ Oui - Date de début de traitement :

Antibiotiques/Antidiarrhéiques/Antiparasitaires (Nom des médicaments) :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRELEVEMENT

Date : **Heure :** **Remarques :**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Cocher le(s) case(s) correspondant à votre situation

- ☐ Diarrhée :
Date de début : Nombre de selles/jour :
☐ Aiguë (<10 jours) ☐ Chronique (longue durée, récurrences)
- ☐ Prurit anal (démangeaisons en journée et/ou la nuit) ☐ Toux
- ☐ Présence de sang et/ou de glaires dans les selles ☐ Eruption cutanée (boutons)
- ☐ Nausées / Vomissements ☐ Fièvre :°C
- ☐ Douleurs abdominales (maux de ventre) ☐ Fatigues
- ☐ Douleurs musculaires
- ☐ Autres signes cliniques :


CONTEXTE

- Etes-vous un cas isolé dans votre entourage ? ☐ Non ☐ Oui
- Adulte - Profession :
- Enfant : ☐ scolarisé ☐ en crèche ☐ autre :
- Avez-vous mangé du poisson cru ou de la viande crue ? ☐ Non ☐ Oui - Date :
- Avez-vous voyagé dernièrement ? ☐ Non ☐ Oui
Si oui Où : Dates : du au
- Vous êtes-vous baigné en rivière dernièrement ? ☐ Non ☐ Oui
Si oui où ? : Date :
- Autres :



Consignes de recueil des selles

Matériel de prélèvement (à récupérer au laboratoire)

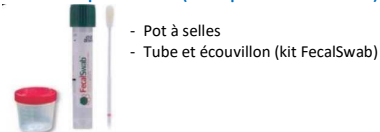

- Pot à selles
- Tube et écouvillon (kit FecalSwab)

Conditions de prélèvement


- Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques.
- Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement (charbon, suppositoires etc.)

Protocole de prélèvement


- Mettre des gants (non fournis par le laboratoire)
- Mettre les selles dans le pot de recueil
- Préparer le tube selon les modalités décrites ci-après

Remplir la fiche de renseignements ci-contre

Porter des gants

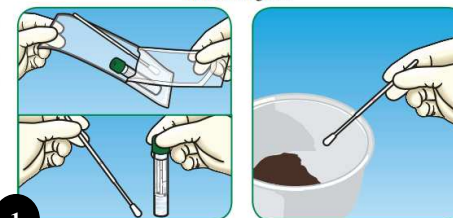

- 1**
- Ouvrir le sachet
 - Prendre l'écouvillon.
 - Ne pas toucher l'embout (le tenir au niveau de la tige)
 - Prélever une **petite quantité de selles en trempant l'extrémité de l'embout** dans les selles et en effectuant une rotation de la tige.
- NB : récupérer de préférence les parties visqueuses liquides ou sanguines

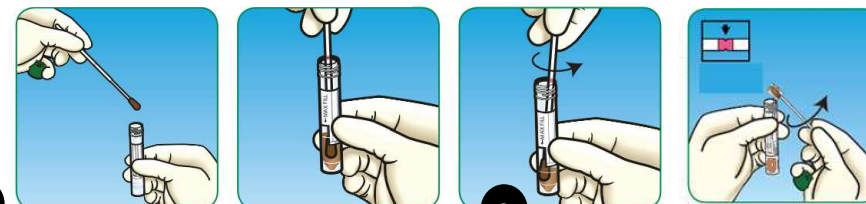

- 2**
- Retirer l'écouvillon et vérifier qu'il y a bien de la matière fécale sur la totalité de l'embout (reprélever de la matière si besoin)
 - Transférer l'écouvillon dans le tube
 - Vérifier que le niveau de remplissage maximum n'est pas dépassé sinon il faudra récupérer un nouveau kit au laboratoire
- 3**
- Effectuer un mouvement de rotation contre la paroi du tube afin de décharger les selles dans le milieu liquide
 - Eloigner le tube de votre visage
 - Retirer et jeter l'écouvillon (ne pas le laisser dans le tube)





Acheminer **le pot et le tube rapidement** au laboratoire



- 4**
- Bien visser le bouchon puis secouer le tube jusqu'à ce que la couleur du liquide soit homogène
- Un échantillon bien préparé est un échantillon dont le milieu est liquide, coloré mais pas opaque.

Indiquer la date et l'heure de prélèvement sur la fiche de renseignements ci-contre
Assurer vous que les 2 prélèvements soient identifiés (Nom, Prénom et DDN) avant de les déposer

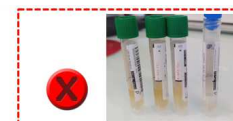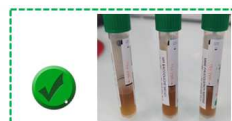

Conservation :
FecalSwab : 24h à température ambiante (15-25°C)
48h au réfrigérateur (2 – 8°C)
Pot de selles : au réfrigérateur (2 – 8°C)